

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器
器具除染用洗浄器 (JMDN 35424000)

EMC 適合

Getinge9100シリーズ

【警告】


1. 本品の使用前に、この添付文書及び取扱説明書に記載されている使用方法及び注意事項の全てを熟読すること。
2. 本品で洗浄する被洗浄物の耐熱温度が100℃以上であることを確認すること。
3. アース（接地端子）は、確実に取り付けること。
4. 漏電遮断器を設置すること。

【禁忌・禁止】


1. 水以外の液体に接続しないこと。
2. 専任の者以外の方は、取り扱いしないこと。（本品は医療機器なので間違った取り扱いをすると故障・けがの原因となる）
3. 改造はしないこと。当社指定の技術員以外は、分解、修理しないこと。
4. 電源コードは、途中で接続したり、延長コードを使用したりしないこと。
5. チャンバを腐食させるおそれのある成分（塩分・強酸・強アルカリ等）を含んだ物質の洗浄は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

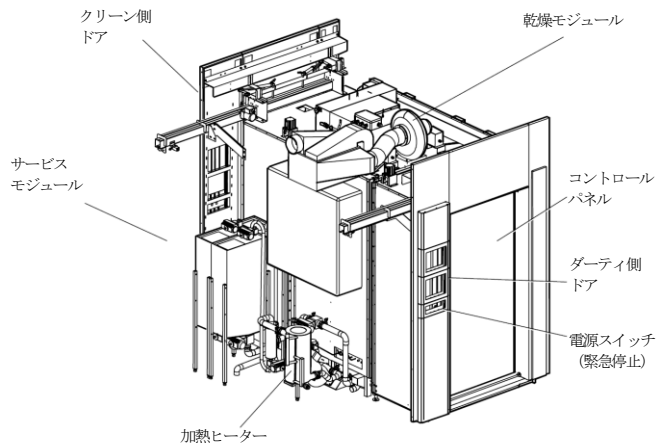

2. コントロールパネル

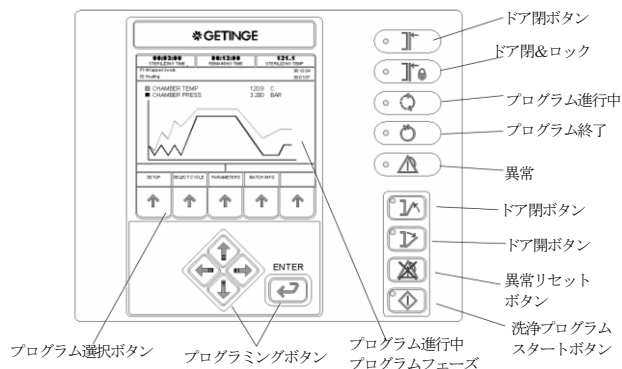

3. 寸法・重量

型式	高さ	幅	奥行	チャンバ容積	重量
9120	2670mm	2400mm	2500mm	3850L	1400kg
9125	2670mm	2400mm	3000mm	4800L	1500kg
9128	2670mm	2400mm	3350mm	5500L	1600 kg
9122	2800mm	2800mm	2700mm	5150L	1650 kg

4. 電気的定格

電気的定格	電圧	AC200V
	周波数	50/60Hz
	消費電力	3.0kW
機器の分類	保護の形式	クラス I 機器
	保護の程度	B 形装着部を持つ機器

5. 作動原理

内蔵循環ポンプにより洗浄水を循環させ、各種アクセサリにセットされた被洗浄物を除洗する。また、内蔵ヒーターにより洗浄水を加熱し、被洗浄物の消毒も行う。附属の乾燥機能により、除洗・消毒後、乾燥をおこなう。

【使用目的、効能又は効果】

再使用可能なコンテナ、車椅子等々の除染・消毒のために用いる洗浄器。

【使用方法等】

以下の手順の詳細は取扱説明書の「概論」「操作パネル」「メニュー」「操作上の取扱説明」「メッセージ」「警告」を参照のこと。

- 1) 電源を入れる。
- 2) 器具を OP カートにのせ、洗浄槽に入れる。
- 3) 実行プログラムを選択する。
- 4) ドア閉ボタンを押し、洗浄槽の扉を閉める。
- 5) スタートボタンを押すと自動的にプログラムを開始する。
- 6) 自動的にプログラムが進行し、完了となる。
- 7) ドア開ボタンを押し、扉を開ける。
- 8) 洗浄槽から器具の乗った OP カートを取り出す。

【使用上の注意】

詳細は取扱説明書の「安全規則」を参照のこと。

1. 装置、被洗浄物は高温になるため、ヤケドに注意すること。
2. アルコール・ガソリン・ガスなどの可燃物は爆発のおそれがあるため入れないこと。
3. 被洗浄物は100℃の高圧に耐えうる物であること。
4. 装置周辺は通風・換気を良くすること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

耐用期間（自主基準）

指定された保守点検を実施した場合 7年

【保守点検に係る事項】

○使用者による保守事項

詳細は取扱説明書の「点検」を参照のこと。

1. 本体の清掃

正面及び側壁は、医療用もしくは一般に使用されているアルコール含有の薬液で洗浄・消毒してください。

2. 洗浄チャンバのクリーニング

- 1) 洗浄チャンバに石灰分が付着しないようにしてください。除去用プログラムを使用して取り除きます。
- 2) ヘンケル社製200mlの石灰除去剤(ドクターワイガー社製ネオデイスチャーBU)をチャンバ内に入れます。
- 3) 洗浄槽の底部に落下物が残っていないかチェックしてください。
- 4) 洗浄カートのスプレーアームが支障なく回転しているかチェックしてください。スプレーアームの穴部が詰まっているかチェックしてください。必要時、スプレーアームを中央のナットをはずして取り外し、きれいに洗い流すこともできます。清掃後に再びスプレーアームを取り付けたら、支障なく回転するかチェックしてください。
- 5) 洗浄槽底部にあるストレーナを取り外して洗ってください。
- 6) 接続アクセサリが給水接続口に適切に接続されていることを確認してください。
- 7) 洗浄カートの給水口フィルターを定期的に清掃して下さい。

○業者による保守点検事項

上記の使用者による点検事項に加えて、製造販売業者指定のサービスマニュアルに基づき点検を行うこと。

1. 洗浄カートのスプレーアームのベアリングは、定期的に点検もしくは交換を行う。
2. 乾燥用エアフィルター及びファンは、定期的に点検もしくは交換を行う。
3. 薬液（洗剤）ポンプ用のホース類は、定期的に点検もしくは交換を行う。

○保管環境等保管時の注意事項

1. 直射日光を避け以下の内容で保管すること。
周囲温度：10～40℃
相対湿度：30～85%
2. 本装置の上に何も積み重ねないこと。
3. 多量に埃又は粉塵の発生する場所には保管しないこと。水濡れ厳禁。

○輸送時の注意事項

1. 特に振動に気をつけて運搬すること。
2. 所定の梱包状態にて運搬すること。

○納入・引渡しに関する事項

インストレーションマニュアルに基づいて設置し、引き渡すこと。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名または名称及び住所等】

- | | |
|-----------|---|
| 1. 製造販売業者 | ゲティンゲ・ジャパン株式会社 |
| 住所 | 〒135-0053
東京都江東区辰巳3-9-2 三井倉庫内 |
| TEL | 03-6758-2280 |
| FAX | 03-6758-2289 |
| 2. 製造業者 | Getinge Disinfection AB |
| | ゲティンゲ ディスインフェクション エービー |
| 住所 | Ljungadalsgatan 11 Box 1505 SE 351 15
Vaxjo SWEDEN |
| 国名 | スウェーデン |

取扱説明書を必ずご参照ください。

GJ-QA-IFU-003L-04